

BagMixer® 400 CC

Malaxeur d'échantillons de 400 mL

Réf. 024 230


PORTE VITRÉE
GARANTIE
À VIE

AMORTISSEURS
GARANTIS
À VIE

GARANTIE
3
ANS



Certification :

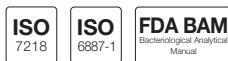

Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

BagMixer® 400 CC malaxe efficacement tout type d'échantillon dans tous les types de sacs, sans aucun risque de contamination. L'échantillon homogénéisé est représentatif de la contamination globale de l'échantillon et prêt pour l'analyse. Les pales amovibles Click & Clean®, système breveté, permettent d'accéder entièrement à la chambre de malaxage pour un nettoyage complet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox 304L
- Porte vitrée
- Écran digital multifonction
- Volume utile : 50 - 400 mL
- Vitesse variable (4 - 6 - 8 - 10 coups/s)
- Durée réglable (1 s – 1 h ou ∞ / compte à rebours)
- Force de malaxage ajustable (Breveté)
- Pales amovibles Click & Clean® (breveté)
- Arrêt des pales côte-à-côte
- Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le haut du sac
- Ouverture de la porte à 270°
- Moteur brushless silencieux
- Bac de sécurité

- Tension et fréquence d'alimentation : 100-240V~ 50-60Hz
- Fusibles : T 3,15A L 240V 5x20 mm
- Puissance max : 55 W

- Dimensions (l x p x h) : 27 x 41,5 x 26,5 cm, poids : 16 kg
- Emballage (l x p x h) : 49,5 x 35 x 36,5 cm, poids : 18,6 kg

- Garantie 3 ans
- Amortisseurs garantis à vie
- Porte vitrée garantie à vie

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE - Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

LIVRÉ AVEC

- 1 bac de sécurité
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 notice simplifiée d'utilisation
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs