

BagMixer® 400 SW

Malaxeur d'échantillons de 400 mL

Réf. 025 100


VITRE
GARANTIE
À VIE

AMORTISSEURS
GARANTIS
À VIE

GARANTIE
3
ANS



Certification :

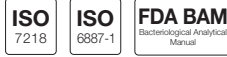

Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

BagMixer® 400 SW est un malaxeur nouvelle génération : design ergonomique et malaxage silencieux. Il est la nouvelle référence des malaxeurs de laboratoire : silencieux, simple d'utilisation et robuste. Avec de nouvelles fonctionnalités, il est adapté à tout type d'application avec une garantie d'extraction optimale. C'est un outil indispensable des laboratoires, évitant tout risque de contamination croisée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Coque tout acier inox 304L
- Malaxage silencieux : moins de 48 db
- Caisson insonorisé
- Ecran digital multifonction
- **Porte vitrée**
- Volume utile : 50 - 400 mL
- Vitesse variable (4 - 6 - 8 - 10 coups/s)
- Durée ajustable (1 s - 1 h ou ∞)
- **Force de malaxage ajustable (breveté)**
- **Pales amovibles Click & Clean® (breveté)**
- **Arrêt des pales côte-à-côte**
- **Fermeture Q-Tight® : 250 kg de pression pour éviter les fuites par le haut**
- Chambre de malaxage en polycarbonate blanc à angles arrondis : nettoyage facile
- Système TotalAccess : ouverture à plat de la porte pour accès total à la chambre de malaxage (breveté)
- Moteur : Moteur brushless super silencieux
- Bac de sécurité intégré
- **Pieds Paulstra™ : grande stabilité pendant le malaxage / ne marquent pas la paillasse**
- **Système LightCode : Vert (prêt), Orange (en cours de malaxage), Rouge (fuite détectée)**
- **EnergySaver : 50% de consommation d'énergie en moins avec le moteur Brushless**
- **Fonction Auto Sleep : passe en mode veille au bout de 30 mn d'inactivité**
- **LiquidSensor : signal lumineux et arrêt immédiat du malaxage en cas de fuite (Breveté)**
- Poignée ambidextre

- Tension et fréquence d'alimentation : 100-240V~ 50-60Hz
- Fusibles : T 3,15A L 240V 5x20 mm
- Puissance max : 55 W

- Dimensions (l x p x h) : 27,5 x 46,5 x 36 cm, poids : 25 kg
- Emballage (l x p x h) : 56 x 41 x 50 cm, poids : 28,2 kg

- Garantie 3 ans
- Amortisseurs garantis à vie
- Vitre garantie à vie

interscience

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE - Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

LIVRÉ AVEC

- 1 bac de sécurité intégré
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 notice simplifiée d'utilisation
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs